

Technische Datenblätter

Aenderung Nr.00 vom 07/11/2022
Mod. 71-A8-DE


PBS 0,6



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Einweg Behälter für die Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen. Modell entwickelt für Arbeitstationen, wo wenig Abfälle produziert werden (Pflegetablett, Wagen, Arztpraxis, Privathäuser)

- ▶ **Rohstoff:** Umweltfreundlicher Kunststoff (Polypropylene Copolymer mit Cadmiumfreiem Masterbatch gefärbt)
- ▶ **Farbe:** Gelb (Material mit schwermetallfreiem Masterbatch gefärbt) (REACH-Konform)
- ▶ **Form:** Zylinderform
- ▶ **Gewicht:** 87 gr.
- ▶ **Maximale Befüllung:** 400 gr.
- ▶ **Volumen:** 0,600 Lt.
- ▶ **Aussenmass:** Ø 100 x 145h mm (mit Deckel montiert und geschlossen)
- ▶ **Basis:** Ø 78

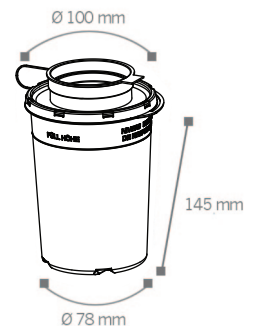

LOGISTISCHE DETAILS:

- ▶ **St pro Karton:** 100 (Gefäss mit separatem Deckel)
- ▶ **Verpackungsmass:** 62x41x34 H cm
- ▶ **St pro Palette:** 2400 pz.
- ▶ **Palettenmass:** 124x82x220 h cm

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ▶ UN-Zulassung - gemäss auf ADR
- ▶ Konform TRBA 250
- ▶ Konform ISO 23907-1 Kite Mark
- ▶ Konform Marque NF
- ▶ Konform FDA K071517

ANWEISUNGEN:

► Montage:

Stark auf die Oberfläche des Deckels drücken, bis alle Raster eingehakt sind.



► Provisorischer Verschluss:

Der Behälter kann provisorisch geschlossen werden: man soll die Kappe mit der konkaven Seite nach oben schliessen.



► Endgültiger Verschluss:

Der Behälter kann endgültig geschlossen werden: man soll die Kappe mit der konkaven Seite nach unten schliessen.



GEBRAUCHSANLEITUNGEN:

► Während des Gebrauchs, schliessen Sie den Deckel provisorisch.



► Wenn der Behälter voll ist, schliessen Sie den Deckel endgültig.



- Breite Öffnung für die Entsorgung verschiedener Abfalltypen, z.B. Teströhrchen, Skalpellen, u.s.w.
- Der Behälter kann auf 134 °C für 18' autoklaviert werden
- Wenn der Behälter voll ist, muss er verbrannt werden. Bei der Verbrennung werden keine giftigen Gase freigesetzt.

► Nadelentsorgung:

Benutzen Sie die spezielle Öffnung für die Nadelentnahme



Benutzen Sie die Öffnung in Form einer Blume um die Insulinkanüle abzuschrauben.



HALTERUNGEN:

► Zange-Halterung für Verwendung auf der Wand oder auf der Wagen.

► Tisch-Tablette mit Raum für PBS 0,6

► Tisch-Halterung mit Saugnäpfe, um den Behälter auf der Arbeitsstation zu fixieren.



VORTEILE:

- Sicher, einfach zu gebrauchen und zu handhaben.
- Falls Sie versuchen, den Behälter nach dem endgültigen Verschluss wieder zu öffnen, reisst die Lasche ab.
- Stich-und-schnittfest
- Mit Griff ausgestattet
- Deckel mit spezieller Öffnung für die Nadelentnahme.
- Auf 134 °C autoklavierbar (mit Bewahrung der Eigenschaften des Gesetzes ISO 23907-1:2019)
- Angabe der maximalen Füllungshöhe
- Endgültiger Verschluss
- Halterungen zur Verfügung
- Entsorgung bei Verbrennung, ohne giftigen Gase freizusetzen.

SICHERHEITSVORSCHLÄGE:

- Verwenden Sie den Behälter nicht vor Montierung des Deckels
- Versuchen Sie nicht, die entsorgten Materialien nach der Entsorgung zu entnehmen
- Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge
- Verschliessen Sie den Behälter nur mit dem dazugehörigen Deckel
- Versuchen Sie nicht, den bereits endgültig verschlossenen Behälter wieder zu öffnen
- Folgen Sie den Sicherheitsanweisungen
- Entsorgen Sie nach den geltenden Rechtsvorschriften
- Nutzen Sie den Griff zum Transport des Behälters